



Joson-Care 2024



安全第一 品質優良 永續經營





經營理念




歷史發展



Joson-Care 強盛興於西元 2000 年正式成立。主要產品線包含醫療床設備 (電動床 / 手動床)、居家護理床設備，不僅在台灣市場具有優良的聲譽，在製造生產技術上更是最有經驗及專業的醫療床製造公司。每一件產品都經過非常嚴格的品質管控過程，以確保準確性、強度和可靠性，在各方面都具有強大的競爭力。

為提升管理效率及達到產品品質符合國際標準規範，更通過 ISO-13485/LVD/EMC/FDA/MDR/QMS 的認證，也驗證公司理念提供高品質品、良好的客戶服務和不斷地技術創新，與此同時可以保證產品的價值及競爭力更是高於業界水準，成為最卓越的醫療器材製造公司。



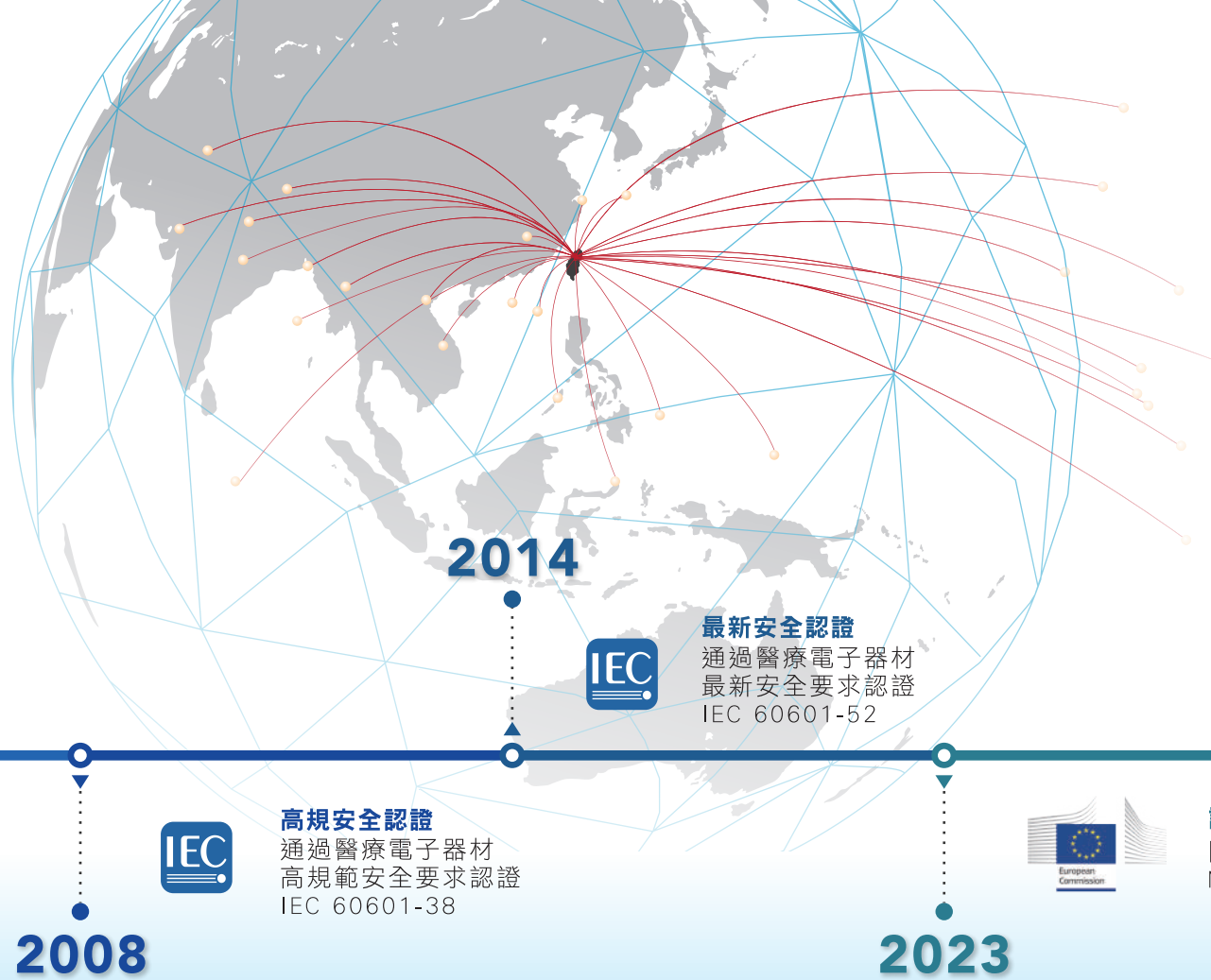

目前 Joson-Care 強盛興外銷至全球 30 餘地區，如美國、日本、法國、韓國、印度、伊朗、巴拿馬、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國...等。

2008



高規安全認證
通過醫療電子器材
高規範安全要求認證
IEC 60601-38

2014



最新安全認證
通過醫療電子器材
最新安全要求認證
IEC 60601-52

2023



許可認證
歐盟醫療器材許可認證
MDR


2023



品質管理系統
醫療器材品質管理
系統準則QMS

多樣的醫療床系列產品，皆自主設計研發而來，從使用者的安全及操作進行產品設計，持續挹注研發能量，歷年來推出的各系列產品，廣受市場好評；透過持續不斷的推陳出新，累積多年研發經驗，更奠定了強盛興立足市場 24 年的成長基石。

創建自有檢驗實驗室，針對醫療床的各部元件，設立專業檢測程序模組，進行耐用度、妥善率、操作性、安全性...等驗證測試，確保產品設計、安全、質量，皆能符合國際安規及市場需求。

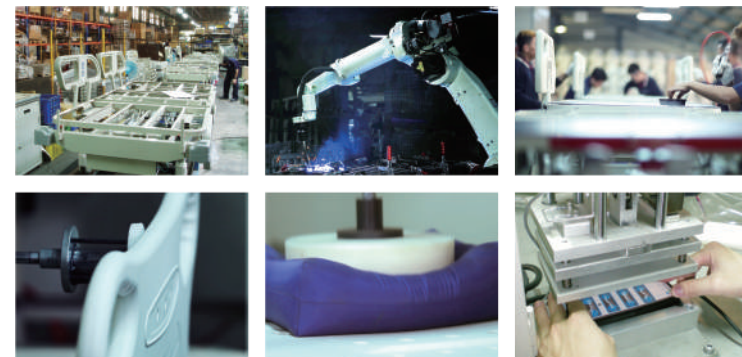

08系列




ES-08FDS



ES-08FSS



MS-08FS

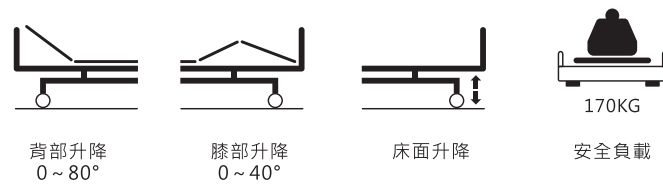

ES-08FDS

衛部醫器製壹登字第000547號





養護型電動床

標配

- 手持操作器
- 護欄 (全覆式)
- 一般輪
- 點滴架插孔 (4個)
- 引流袋掛勾 (4個)
- 床墊擋片 (6個)

選配

- 防塵中控煞車系統
- 防塵煞車輪
- 適用床墊尺寸 L1850×W840×H100mm

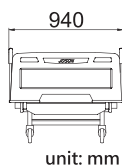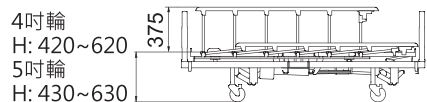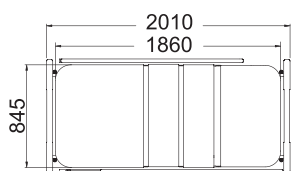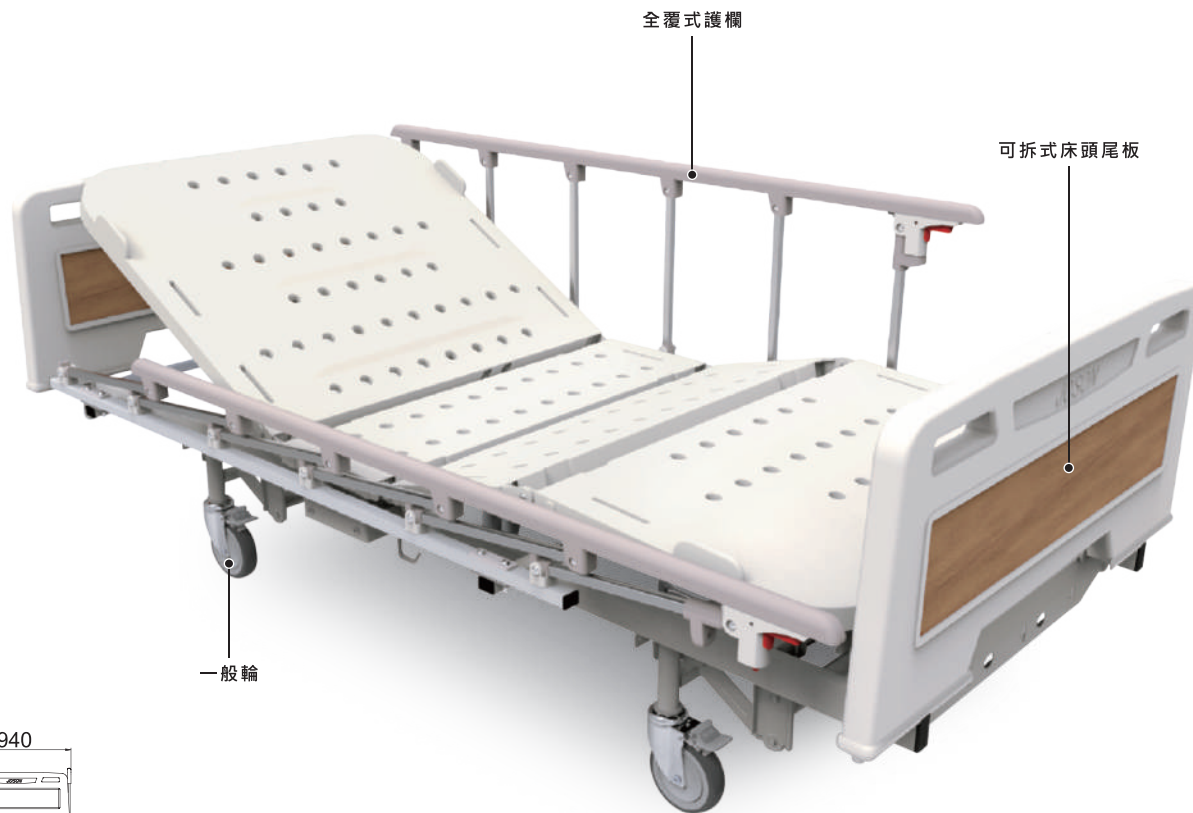

全覆式護欄 架設床邊後，可依需求平放或立起，以保護臥床者



手持操作器




引流袋掛勾



插式床頭尾板



防塵中控煞車系統

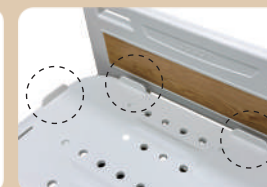

床墊止滑設計-床墊擋片

ES-08FSS

衛部醫器製壹登字第000547號


養護型電動床 (鐵板床面)

標配

- 手持操作器
- 護欄 (全覆式)
- 一般輪
- 床頭延伸
- 點滴架插孔 (4個)
- 引流袋掛勾 (4個)

選配

- 防塵中控煞車系統
- 防塵煞車輪
- 適用床墊尺寸 L1800×W810×H100mm

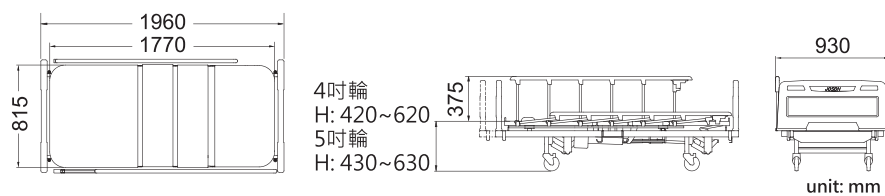

居家照護床



鋼製粉體塗裝-鐵板床面




手持操作器



點滴架插孔



一般輪-ON鎖定/OFF解鎖

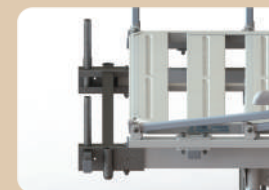

床頭延伸設計

MS-08FS / MF-08FS

3搖養護型手動床 / 2搖養護型手動床



衛部醫器製壹登字第003251號

標配

- 護欄 (全覆式)
- 一般輪
- 點滴架插孔 (4個)
- 引流袋掛勾 (4個)
- 床墊擋片 (6個)

選配

- 墊高角管 (MF-08FS)
- 防塵煞車輪
- 適用床墊尺寸 L1850×W840×H100mm

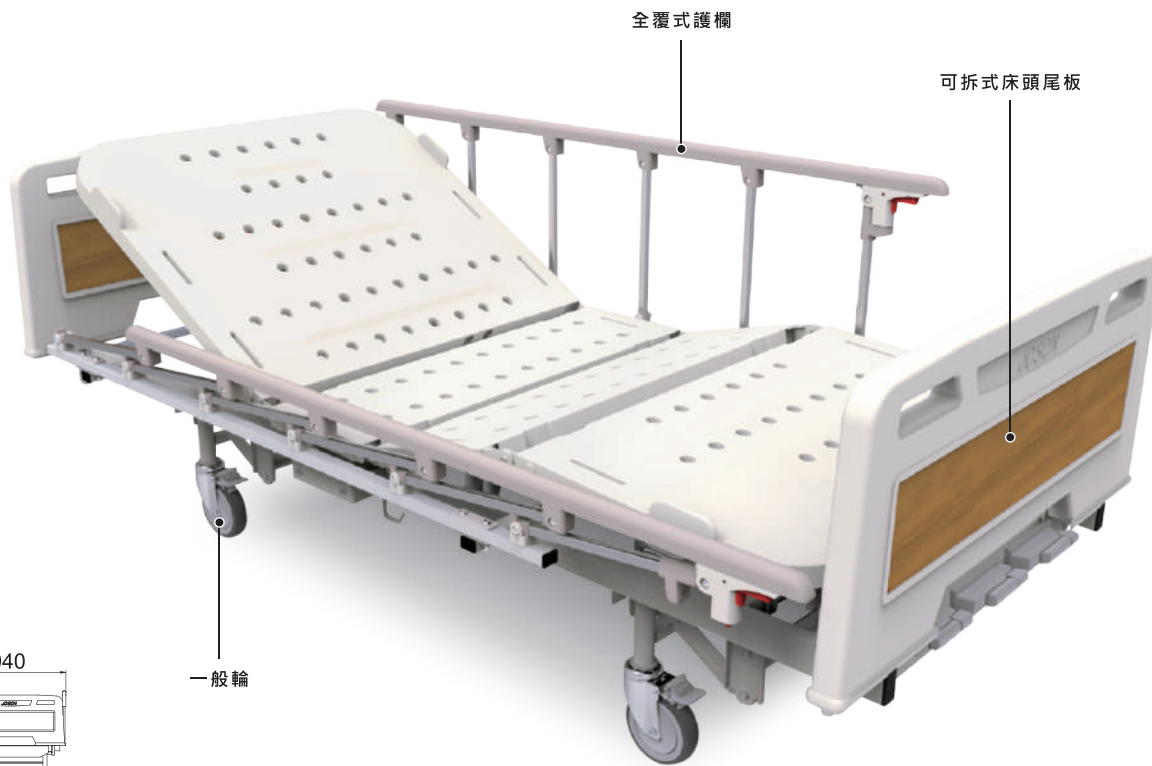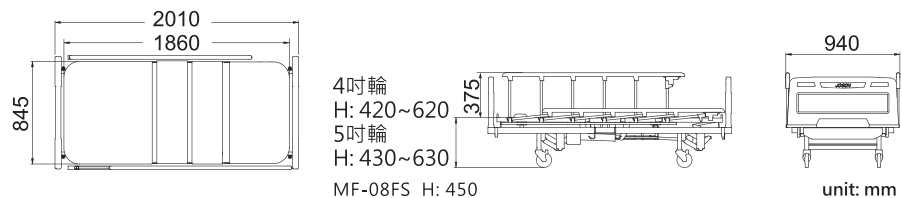

手搖搖桿 手搖桿用於操作背部、膝部或頭膝聯動調整




引流袋掛勾



全覆式護欄



墊高角管
(MF-08FS 選配)

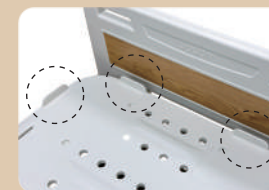

床墊止滑設計-床墊擋片



規格	ES-08FDS	ES-08FSS	MS-08FS	MF-08FS	功能配備	ES-08FDS	ES-08FSS	MS-08FS	MF-08FS
床全長(至防撞塊)	L : 2010mm	L : 1960mm	L : 2010mm	L : 2010mm	手持操作器	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
床全寬	W : 940mm	W : 930mm	W : 940mm	W : 940mm	護欄	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床面長	L : 1860mm	L : 1770mm	L : 1860mm	L : 1860mm	防塵煞車中控系統	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
床面寬	W : 845mm	W : 815mm	W : 845mm	W : 845mm	防塵煞車輪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
床面高度	4吋輪H:420~620mm	4吋輪H:420~620mm	4吋輪H:420~620mm	H : 450mm	一般輪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5吋輪H:430~630mm	5吋輪H:430~630mm	5吋輪H:430~630mm		床頭延伸		<input checked="" type="checkbox"/>		
背部床面升降	0~80°	0~85°	0~80°	0~80°	點滴架插孔	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
膝部床面升降	0~40°	0~40°	0~40°	0~40°	引流袋掛勾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
安全負載	170kg	170kg	170kg	170kg	床墊擋片	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床輪直徑	5" 或 4"	5" 或 4"	5" 或 4"	5"					
傳動方式(馬達數)	3	3	手搖桿	手搖桿					
供給電壓	AC 115V	AC 115V	無	無					
頻率	50/60Hz	50/60Hz	無	無					
後備電源	無	無	無	無					
防塵、防水等級 (電控系統)	IP42	IP42	無	無					
醫療安規認證	無	無	無	無					

標配 選配

適用床墊尺寸	L1850xW840xH100	L1800xW810xH100	L1850xW840xH100	L1850xW840xH100
--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

規格公差：床全長/寬/高 ±20mm 護欄寬 ±30mm 角度 +5° -0°



總公司 強盛興企業股份有限公司

📍 桃園市龜山區湖山街180巷77弄11號

☎ 03-329-0925

✉ overseas@joson-care.com.tw

🌐 www.joson-care.com

台中 分公司

地址：台中市西屯區成都路280號1樓

電話：04-2316-0743

台南 分公司

地址：台南市仁德區中正路一段732號

電話：06-266-2809



Document No.: JCQB-099
Release Date: 2024.06.01
Version: I