



Joson-Care 2024



安全第一 品質優良 永續經營





經營理念




歷史發展



Joson-Care 強盛興於西元 2000 年正式成立。主要產品線包含醫療床設備 (電動床 / 手動床)、居家護理床設備，不僅在台灣市場具有優良的聲譽，在製造生產技術上更是最有經驗及專業的醫療床製造公司。每一件產品都經過非常嚴格的品質管控過程，以確保準確性、強度和可靠性，在各方面都具有強大的競爭力。

為提升管理效率及達到產品品質符合國際標準規範，更通過 ISO-13485/LVD/EMC/FDA/MDR/QMS 的認證，也驗證公司理念提供高品質品、良好的客戶服務和不斷地技術創新，與此同時可以保證產品的價值及競爭力更是高於業界水準，成為最卓越的醫療器材製造公司。



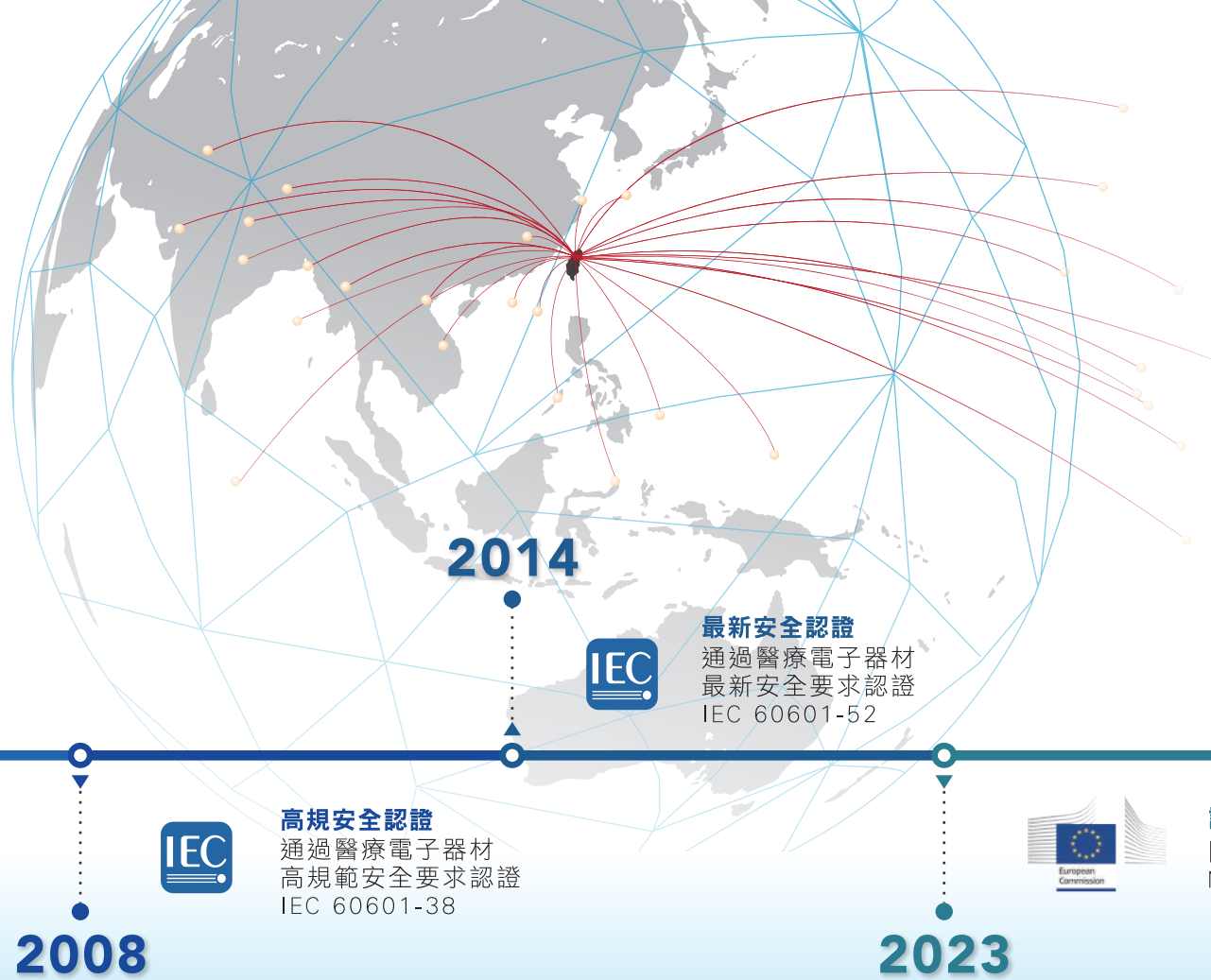

目前 Joson-Care 強盛興外銷至全球 30 餘地區，如美國、日本、法國、韓國、印度、伊朗、巴拿馬、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國...等。

2008



高規安全認證
通過醫療電子器材
高規範安全要求認證
IEC 60601-38

2014



最新安全認證
通過醫療電子器材
最新安全要求認證
IEC 60601-52

2023



許可認證
歐盟醫療器材許可認證
MDR


2023



品質管理系統
醫療器材品質管理
系統準則QMS

多樣的醫療床系列產品，皆自主設計研發而來，從使用者的安全及操作進行產品設計，持續挹注研發能量，歷年來推出的各系列產品，廣受市場好評；透過持續不斷的推陳出新，累積多年研發經驗，更奠定了強盛興立足市場 24 年的成長基石。

創建自有檢驗實驗室，針對醫療床的各部元件，設立專業檢測程序模組，進行耐用度、妥善率、操作性、安全性...等驗證測試，確保產品設計、安全、質量，皆能符合國際安規及市場需求。

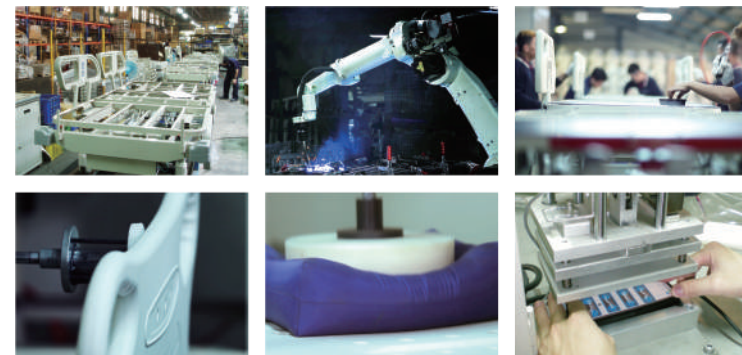

18系列



ES-18UDS / ES-17UDS



背部升降
0~70°



膝部升降
0~30°




床面升降




背膝聯動



170KG
安全負載

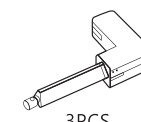

3PCS
線性傳動推桿

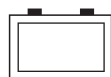

後備電池盒



IP54
電控系統
防水等級



剪力雙向
釋放設計

ES-18UDS

超低型電動床


衛部醫器製壹登字第000547號

標配

- 手持操作器
- 防塵中控煞車系統
- 床墊擋片 (4個)


選配

- 護欄 (全覆式/扶手式/插式)
- 防塵煞車輪
- 適用床墊尺寸 L1900×W890×H100mm

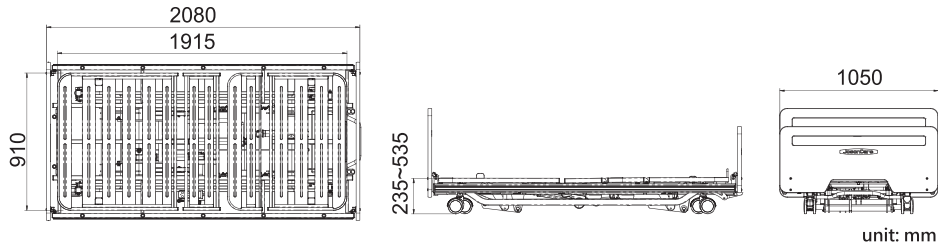

超低床身

日本品質・臺灣製造
貼近地面 減少跌落時受傷程度

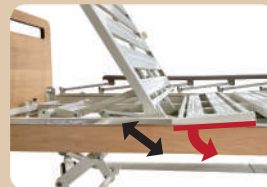

剪力雙向釋放設計



防塵中控煞車系統



可拆式床頭尾板



床墊止滑設計-床墊擋片

ES-17UDS

衛部醫器製壹登字第000547號





超低型電動床

標配

- 手持操作器
- 防塵中控煞車系統

選配

- 護欄 (全覆式/扶手式/插式)
- 防塵煞車輪
- 適用床墊尺寸 L1830×W830×H100mm

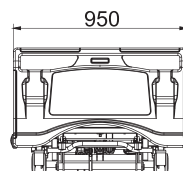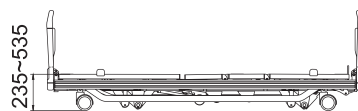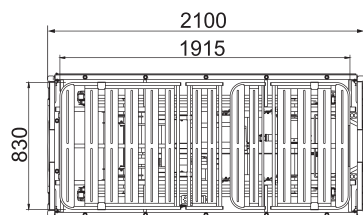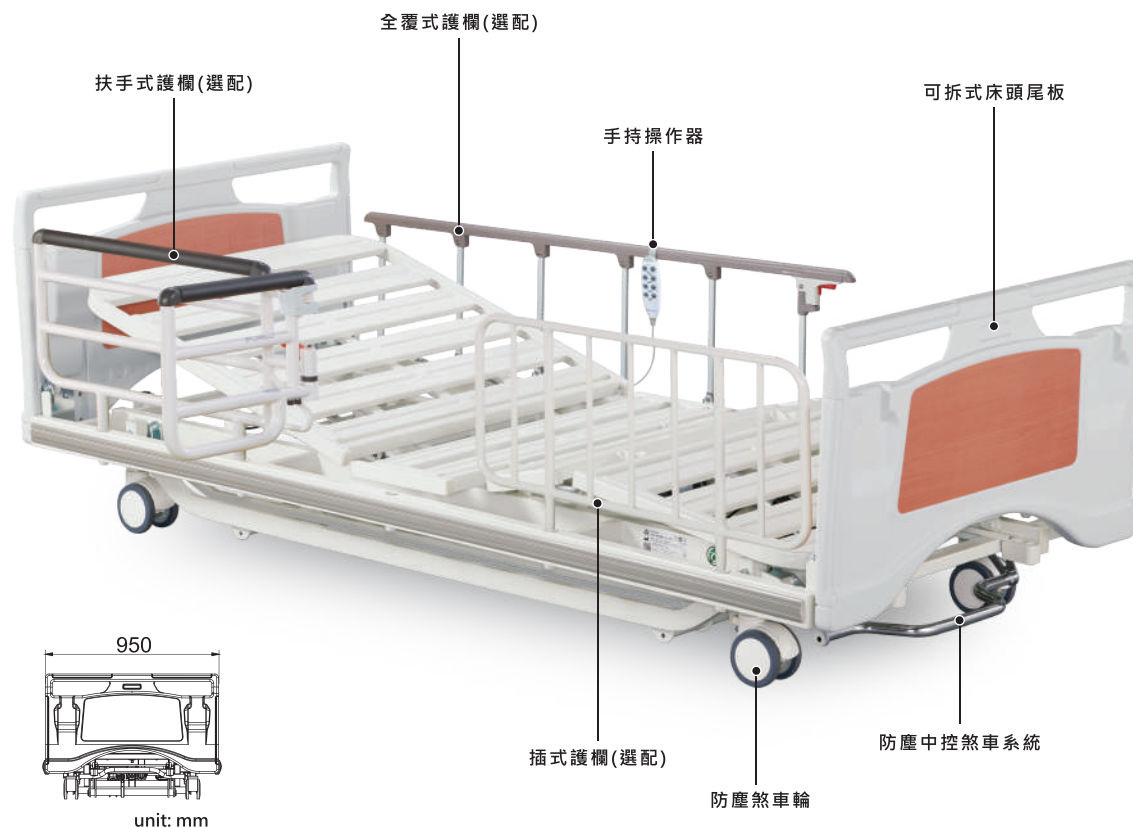

unit: mm

居家照護床



剪力雙向釋放設計



可拆式床頭尾板



防塵中控煞車系統




各式護欄選配 (全覆式/扶手式/插式)

18 / 17系列

超低床身設計

最低床高僅 **23.5** 公分

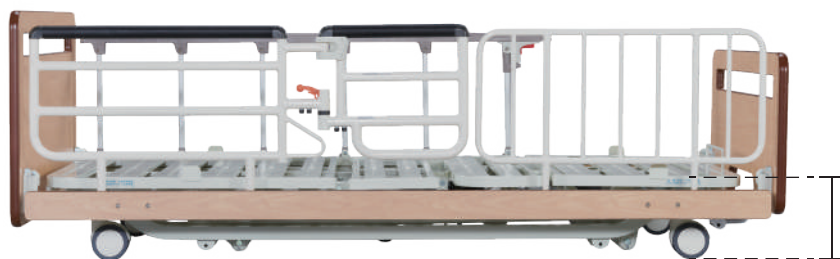

ES-18UDS

23.5cm



ES-17UDS

剪力雙向釋放設計

背板抬升時，臀板也同時下降，創造腰部空間，減少調整背部角度時的滑動，降低對肌肉組織的剪力及皮膚的摩擦力，舒緩背部及腹部的壓力，呈現舒適且穩定的坐姿體位。

符合人體工學的背臀連動
讓腰部不壓迫，更舒適

背板和臀板
的空間加大



臀板下沉





規格	ES-18UDS	ES-17UDS	功能配備	ES-18UDS	ES-17UDS
床全長	L : 2080mm	L : 2100mm	手持操作器	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床全寬	W : 1050mm	W : 950mm	護欄：扶手式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
床面長	L : 1915mm	L : 1915mm	全覆式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
床面寬	W : 910mm	W : 830mm	插 式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
床面高度	4"防塵煞車輪 235~535mm	4"防塵煞車輪 235~535mm	可拆式床頭尾版	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
背部床面升降	0~70°	0~70°	防塵中控煞車系統	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
膝部床面升降	0~30°	0~30°	防塵煞車輪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全負載	170kg	170kg	一般輪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
床輪直徑	4"	4"	點滴架插孔	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
傳動方式(馬達數)	3	3	床墊擋片	<input checked="" type="checkbox"/>	
供給電壓&頻率	AC110V ; 50/60Hz	AC110V ; 50/60Hz			
後備電池盒(不含電池)	9V鹼性電池3顆	9V鹼性電池3顆			
防塵、防水等級(電控系統)	IP54	IP54			

標配 選配

適用床墊尺寸	L1900×W890×H100	L1830×W830×H100
--------	-----------------	-----------------

規格公差：床全長/寬/高 ±20mm

護欄寬 ±30mm

角度 ±5°



總公司 強盛興企業股份有限公司

📍 桃園市龜山區湖山街180巷77弄11號

☎ 03-329-0925

✉ overseas@joson-care.com.tw

🌐 www.joson-care.com

台中 分公司

地址：台中市西屯區成都路280號1樓

電話：04-2316-0743

台南 分公司

地址：台南市仁德區中正路一段732號

電話：06-266-2809



Document No.: JCQB-099
Release Date: 2024.06.01
Version: I